

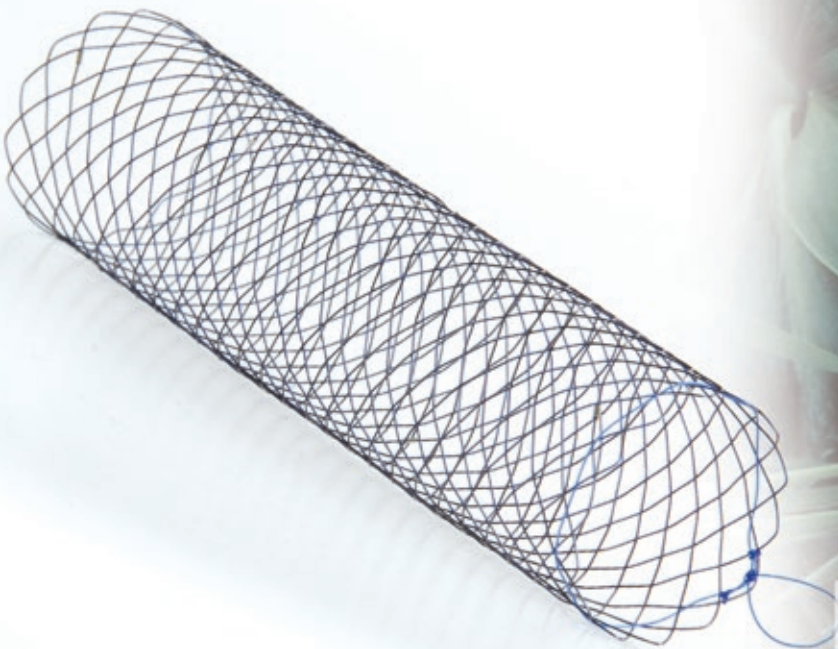


Enterella

Пилородуоденальный стент

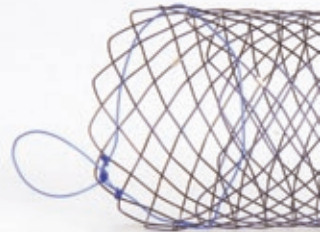

Enterella

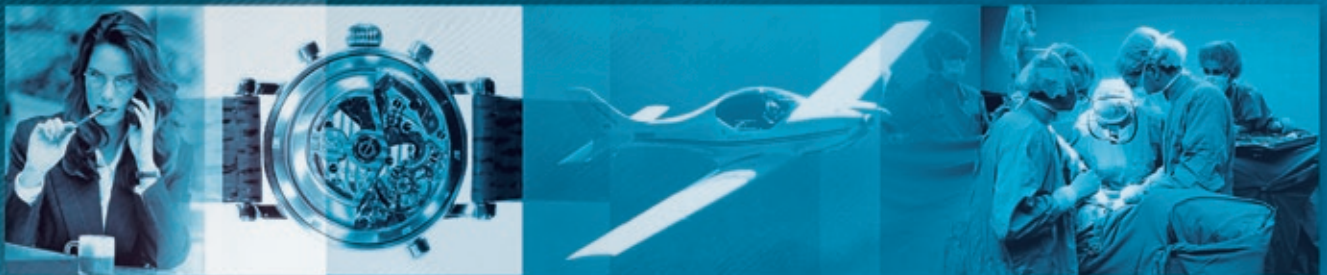

Легкое высвобождение стента

Превосходная гибкость стента и системы доставки

Атравматичные концы

Рентгенконтрастные маркеры

Возможность репозиции стента во время установки



www.stents.ru
info@stents.ru
тел.: 8 800 1001 758

Пилородуоденальный стент Enterella

Саморасширяющийся нитиноловый стент, помещенный в систему доставки.
Установка под эндоскопическим и/или рентгеноскопическим контролем.
Имеются модификации стента с полиуретановым покрытием и без покрытия.

Показания:

Паллиативное лечение злокачественных стриктур пилородуоденальной зоны.

Противопоказания:





Тонкокишечная ишемия.
Перфорация кишки.
Внутрибрюшной абсцесс.
Тяжелый асцит.
Тяжелая коагулопатия.

Преимущества:

- ☑ **Превосходная гибкость** — легкое прохождение стента по сложным анатомическим изгибам.
- ☑ **Атравматичные концы** — снижение вероятности травматизации желудочно-кишечной стенки.
- ☑ **Рентгенконтрастные маркеры на теле и на обоих концах стента** — превосходная визуализация стента.
- ☑ **Стальная петля на оральном конце стента** — возможность репозиции стента в течение пяти дней после установки.
- ☑ **Система репозиции стента** — возможность втянуть стент обратно в систему доставки во время имплантации.

Дополнительная информация:

Система доставки имеет диаметр 10F (3,2 мм) и длину 210 см, что обеспечивает прохождение через рабочий канал эндоскопа.
Рентгенконтрастная атравматичная олива.
Совместим с проводником 0,035" (0,89 мм).
Укорочение стента до 30%.

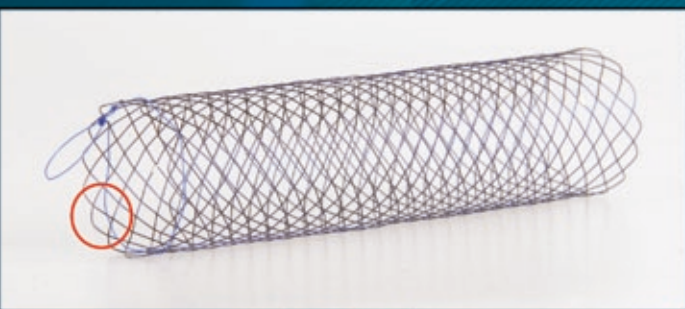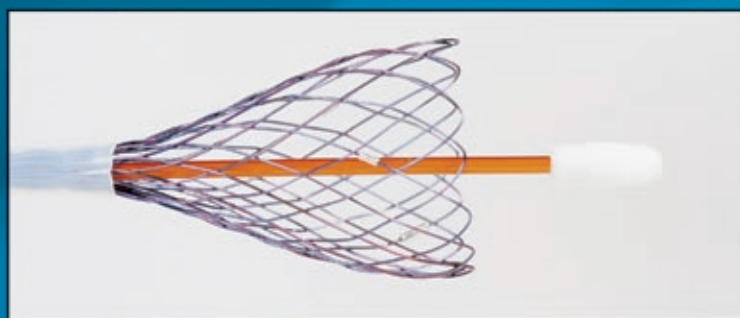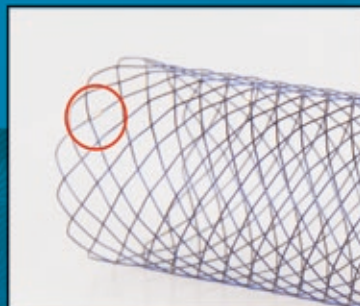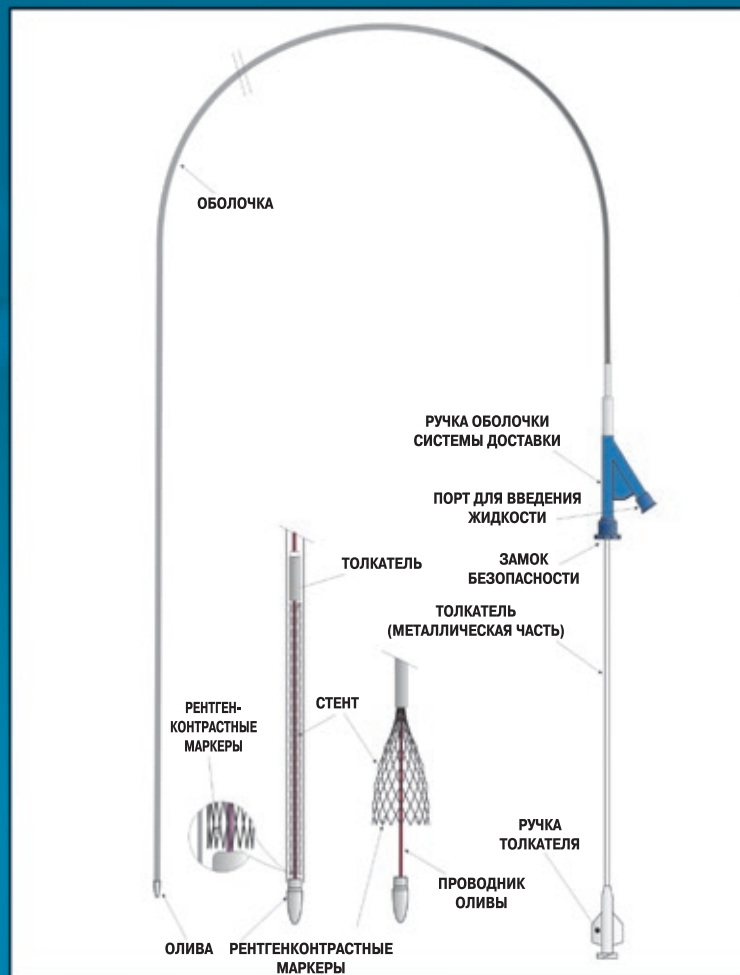

Доступные размеры:

Стандартные модификации пилородуоденальных стентов Enterella:

Кат. №	Диаметр стента [мм]	Длина стента [мм]
019-04-20-082	20	82
019-04-20-090	20	90
019-04-20-113	20	113
019-04-20-135	20	135
019-04-22-082	22	82
019-04-22-090	22	90
019-04-22-113	22	113
019-04-22-135	22	135
019-04-25-082	25	82
019-04-25-090	25	90
019-04-25-113	25	113
019-04-25-135	25	135

Региональный представитель:

Производитель:
ELLA-CS, s.r.o.
Czech Republic

Представитель в России:
ООО «Медэра»
г. Казань, пр. Ямашева, 36.
Тел: (843) 2906910, 5199702, 5199703
E-mail: info@stents.ru www.stents.ru