

# Danis Seal

Пищеводный стент Danis Seal



# Danis Seal



**Удаляемый пищеводный стент**

**Оптимальные размеры и высокая расширяющая сила**

**Надежное силиконовое покрытие**

**Специальный антимиграционный дизайн**



(843) 245 22 75  
(843) 245 22 85  
[www.stents.ru](http://www.stents.ru)  
[info@stents.ru](mailto:info@stents.ru)

## Пищеводный стент Даниш Сеал

### Пищеводный стент Даниш Сеал

Стент Даниш Сеал разработан для использования при перфорациях и разрывах пищевода. Уникальный дизайн стента позволяет использовать его при специальных показаниях.

#### Показания

##### Перфорации пищевода:

- Несостоятельности анастомоза после хирургического вмешательства
- Разрывы пищевода (спонтанный разрыв - синдром Бурхаве; ятрогенными разрывами/перфорацией, происходящие во время дилатации пищевода, эндоскопических манипуляций, травматические разрывы пищевода вследствие травмы)
- Для укрепления пищевода вследствие хирургического вмешательства.

#### Преимущества


- ✓ Уникальное плетение стента и большой диаметр - снижение вероятности миграции стента
- ✓ Атравматичные концы стента - снижение риска повреждения пищевода
- ✓ Рентгенконтрастные маркеры на концах и в середине стента - превосходная визуализация
- ✓ Петли для извлечения на обоих концах стента - возможность репозиции и извлечения с помощью Ella extractor
- ✓ Прочное силиконовое покрытие - высокая механическая прочность и стойкость к воздействию кислот

#### Противопоказания

Пациенты которым невозможно выполнить эндоскопию  
Лимфома пищевода, трахеи, легких, гортани  
Некроз пищевода после хирургического вмешательства  
Полная несостоятельность анастомоза

#### Дополнительное описание

Увеличенный диаметр стента создает оптимальное давление на стенки пищевода. Стент покрыт силиконом изнутри, внутренняя часть стента гладкая, наружная имеет ребра плетения. Уникальное плетение снижает вероятность миграции. Небольшой непокрытый участок на концах стента инкапсулируется слизистой и создает дополнительную герметизацию на концах стента.

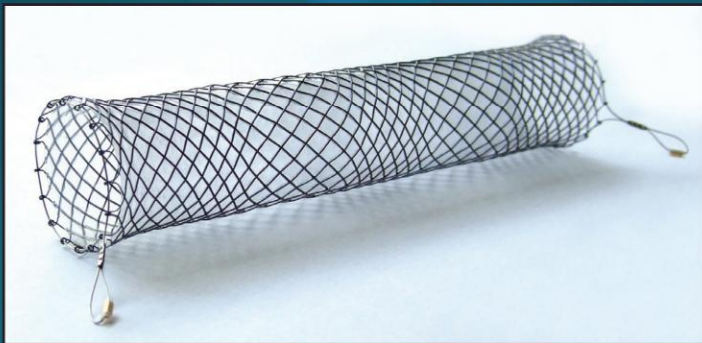



#### Доступные размеры

Кат. №	Пищеводный стент Даниш Сеал			Система доставки	
	Диаметр концов стента, мм	Диаметр тела стента, мм	Длина, мм	Активная длина, см	Внешний диаметр, [F]
019-11-25-135	30	25	135	75	28/18

#### Система доставки



#### Атравматичная олива

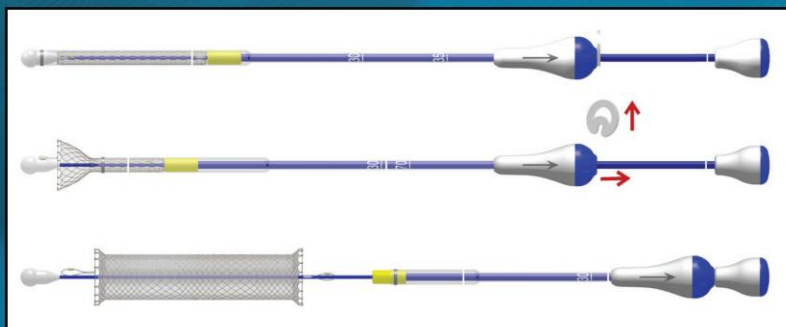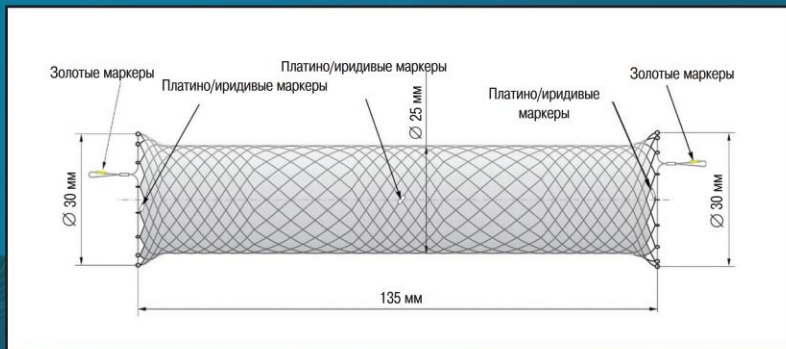

Региональный представитель:

Производитель:  
**ELLA-CS, s.r.o.**  
Czech Republic

Представитель в России:  
**ООО "Медэра"**  
г. Казань, пр. Ямашева, 36  
Тел.: (843) 245 22 75, 245 22 85  
E-mail: info@stents.ru www.stents.ru