

# Danis Procedure Pack

Стент для остановки  
кровотечений из варикозно  
расширенных вен пищевода



(843) 245 22 75  
(843) 245 22 85  
[www.stents.ru](http://www.stents.ru)  
[info@stents.ru](mailto:info@stents.ru)

**Временный стент-система для остановки кровотечений  
из варикозно расширенных вен пищевода**

**Простая имплантация без эндоскопа и рентген-контроля**

**Надежный гемостаз прямой компрессией варикозных вен**

**Пероральный прием пищи сразу после имплантации**

## Стент для остановки кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода Danis stent

Саморасширяющийся нитиноловый стент, помещенный в систему доставки. Набор содержит все предметы, необходимые для процедуры имплантации.

### Показания:

Острое кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода.

### Противопоказания:

Кровотечение другого происхождения (например, перфорация).

Стриктура пищевода.

Опухоль верхних дыхательных путей.

### Преимущества:

- Уникальный способ плетения стента – уменьшающий вероятность миграции стента.
- Достаточная компрессия вен для эффективного гемостаза.
- Атравматичные концы стента – снижение риска гиперплазии и повреждения стенок пищевода.
- Рентгенконтрастные платино/иридевые маркеры в середине и на концах стента – точная визуализация и позиционирование стента.
- Стальные петли с покрытием и рентгенконтрастными маркерами – возможность репозиции и удаления стента.
- Легкое эндоскопическое извлечение стента (для атравматичного извлечения рекомендуется использовать экстрактор Pexella).

### Преимущества метода:

- Имплантация без эндоскопического и рентгеноскопического контроля.
- Возможность детального исследования эндоскопом пищевода, желудка, кардии, двенадцатиперстной кишки сразу после имплантации.
- Пероральный прием пищи сразу после имплантации.




### Дополнительная информация:

Рекомендуется удалять стент в течении 7-ми дней после имплантации. Стент Даниса поставляется в двух наборах: базовом и расширенном. В базовый набор входит: стент помещенный в систему доставки, металлический проводник, пластиковые шприцы, инструкция по применению, карта пациента, клейкая этикетка стента.

В расширенный набор входит (дополнительно к базовому набору): роторасширитель, емкость для сплевывания, бумажные полотенца, стерильные перчатки, пакет для отходов с клипсами.

Диаметр системы доставки 9,4 мм (28 F)/6,4 мм (19 F).

Длина системы доставки 60 см.

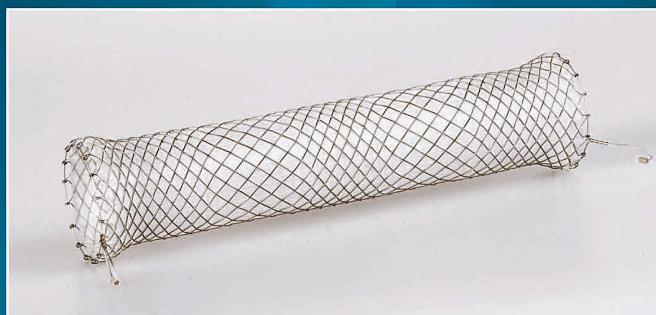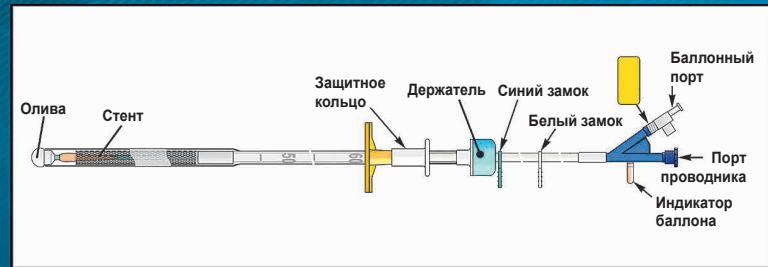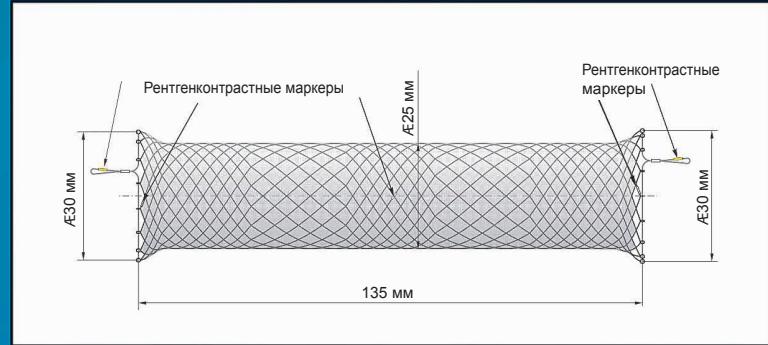

### Доступные размеры:

Кат. №	Стент			Система доставки	
	Диаметр концов, [мм]	Диаметр, [мм]	Длина, [мм]	Длина, [см]	Диаметр, [F]
019-08S-25-135	30	25	135	60	28 / 20
019-08S-25-135-B	30	25	135	60	28 / 20

Региональный представитель:

Производитель:  
ELLA-CS, s.r.o., Czech Republic

Представитель в России:  
ООО «Медэра»  
г. Казань, пр. Ямашева, 36.  
Тел: (843) 2452275, 2452285  
E-mail: info@stents.ru www.stents.ru